

LINHA DE AUTOCLAVES

FLEX


AUTOCLAVE HORIZONTAL SILENCIOSA FLEX BIVOLT - AHDGFCZBIVLT

NOME TÉCNICO: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL
GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX BVLVLT - CINZA

CAPACIDADES: 12L 21L 30L 42L 60L 75L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Registro ANVISA 10430810012
- Tensão BIVOLT automático
- Frequência de 50/60 Hz
- Temperatura padrão de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C
- Pressão de trabalho de 1 a 3 kgf/cm²;
- Bandeja em alumínio;
- Acessórios inclusos, 02 bandejas, 01 mangueira;
- Assistência técnica com ampla rede em todo o Brasil, com atendimento realizado por profissionais capacitados;
- Norma ISO, equipamento produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016
- Garantia de 1 ano.

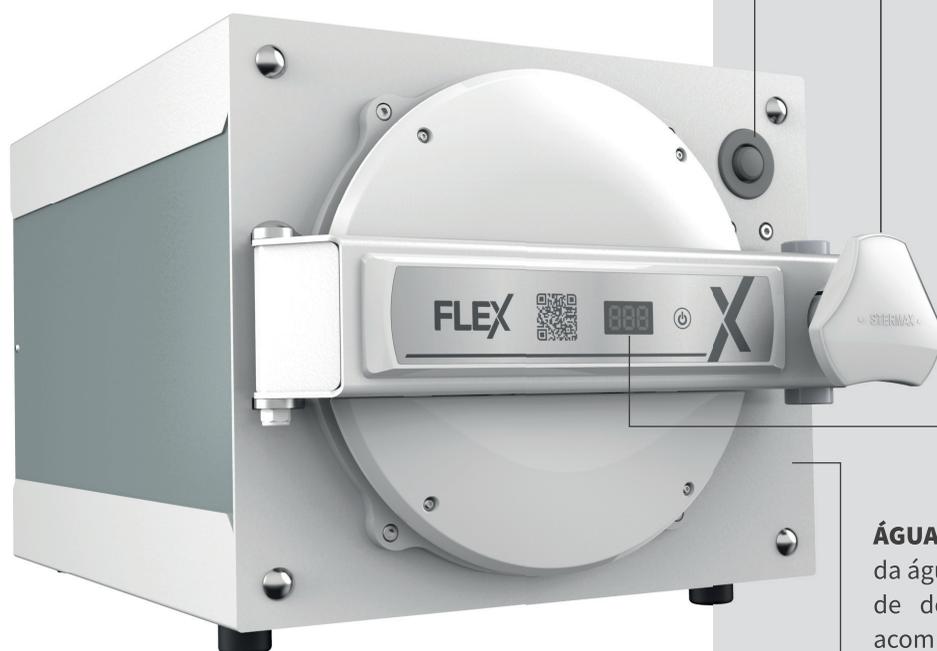

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: em aço inox AISI 304. O aço inoxidável é um material nobre indicado para a fabricação das câmaras de esterilização. É muito mais resistente e seguro que o alumínio e possui uma vida útil maior.

VEDAÇÃO: Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização.

SECAGEM: É possível escolher entre a secagem dentro do próprio ciclo, após a esterilização com a porta entre aberta e com a resistência ligada. Há também a possibilidade de realizar a secagem após a conclusão completa do ciclo, deixando a porta fechada, porém é aplicado uma carga de tensão na resistência até que atinja determinada temperatura e desligue, quantas vezes forem necessárias para secar os mais diversos materiais;

DESPRESSURIZAÇÃO E DESAERAÇÃO Automática (lenta) ou manual através do botão frontal (rápida);

FECHO DA PORTA: Mecanismo de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, um dispositivo patenteado que impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna e oferece maior durabilidade, segurança e suavidade no acionamento.

PAINEL: Visor Digital com indicação de valores relativos ao funcionamento da autoclave. QR Code com link para acessar site, telefones, manual de instrução e assistência técnica Stermax.



ÁGUA, VAPOR E ABASTECIMENTO: Drenagem da água e vapor excedente através de mangueira de descarga até o galão de descarte (não acompanha o galão). Ciclo confinado de vapor, não libera vapor no ambiente. Água limpa a cada ciclo. Abastecimento manual de água.

ESTRUTURA: Gabinete e Porta construídos em aço carbono – resistente e robusto.

STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI

CNPJ FILIAL: 84.859.552/0002-20


Rua Jandaia do Sul, 488, Emiliano Perneta, Pinhais - PR

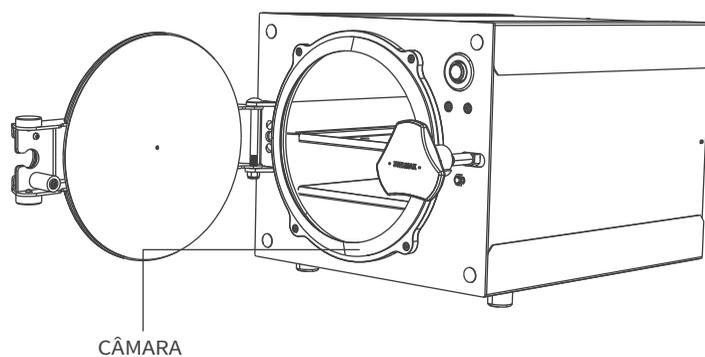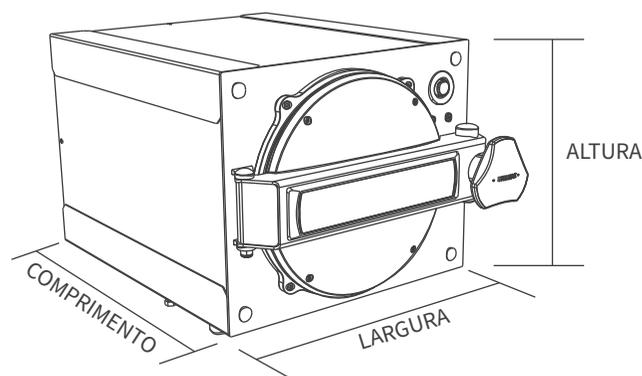

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO


Modelo	Comp.	Largura	Altura	Diâm. da Câmara	Prof. da Câmara	Peso Bruto
12L	60 cm	36 cm	31 cm	Ø 21 cm	38 cm	18 kg
21L	60 cm	40 cm	35 cm	Ø 24 cm	42 cm	20 kg
30L	63 cm	46 cm	39 cm	Ø 29 cm	38 cm	26 kg
42L	79 cm	46 cm	39 cm	Ø 29 cm	54 cm	32 kg
60L	78 cm	52 cm	46 cm	Ø 35 cm	58 cm	42 kg
75L	94 cm	52 cm	45 cm	Ø 35 cm	73 cm	47 kg

MEDIDAS EMBALADO

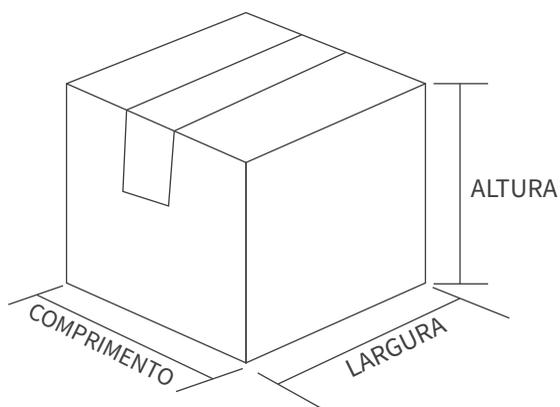


Modelo	Comp.	Largura	Altura	Peso Bruto
12L	71 cm	52 cm	46 cm	22 kg
21L	71 cm	52 cm	46 cm	25 kg
30L	71 cm	52 cm	48 cm	31 kg
42L	83 cm	52 cm	48 cm	36 kg
60L	89 cm	59 cm	55 cm	48 kg
75L	105 cm	59 cm	55 cm	55 kg

MEDIDAS BANDEJAS

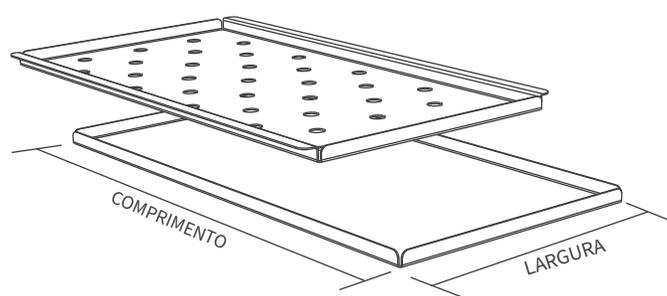

Modelo	Superior (CxLxA)	Inferior (CxLxA)
12L	36 x 15,5 x 1 cm	36 x 15,5 x 1 cm
21L	41 x 20 x 1 cm	41 x 20 x 1 cm
30L	37,5 x 24,5 x 1 cm	37,5 x 24,5 x 1 cm
42L	53,5 x 24,5 x 1 cm	53,5 x 24,5 x 1 cm
60L	57 x 31 x 1 cm	57 x 31 x 1 cm
75L	72 x 31 x 1 cm	72 x 31 x 1 cm

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

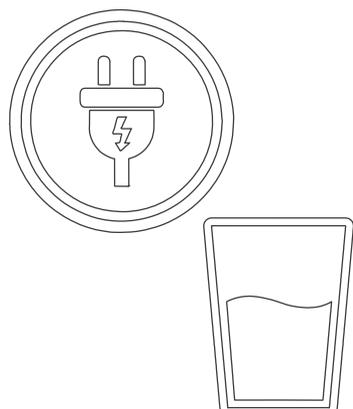

Modelo	Voltagem	Potência	Amperagem	Quant. de Água
12L	Bivolt Aut.	800 W	10 A	250 ml
21L	Bivolt Aut.	800 W	10 A	250 ml
30L	Bivolt Aut.	1100 W	20 A	350 ml
42L	Bivolt Aut.	1100 W	20 A	350 ml
60L	Bivolt Aut.	1400 W	20 A	550 ml
75L	Bivolt Aut.	2000 W	20 A	700 ml

LINHA DE AUTOCLAVES

FLEX



STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI

CNPJ FILIAL: 84.859.552/0002-20

Rua Jandaia do Sul, 488, Emiliano Pernetá, Pinhais - PR